



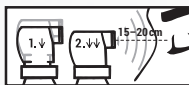

MEMBRASIN®
VISION VITALITY SPRAY

With Sea Buckthorn Oil

Dansk Nederlands
Deutsch Norsk
English Suomi
Français Svenska

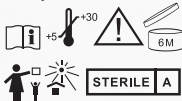

AROMTECH LTD.
VETURILLIORTINIE 1
95410 TORNIIO,
FINLAND
AROMTECH.COM

Last revision: 01/2019

0038E-15



CE 0537

membrasin.fi

ENGLISH: Membrasin Vision Vitality Spray® relieves dry eye symptoms and moisturizes the skin around the eyes. Always apply the spray on closed eyelids only. The microemulsion contains sea buckthorn oil that slowly spreads on the tear film. The oil strengthens the tear lipid layer to protect the eyes from drying. Hyaluronate supports the water binding capacity of the tear fluid and lubricates the eyes; it also prevents cell damage. Thanks to its special design the bottle can be used in any position. Developed and manufactured in Finland, Membrasin Vision Vitality Spray® is a registered Medical Device product with no alcohol, no preservatives, and no ingredients of animal origin. Suitable for sensitive eyes and daily use.

Instructions for use: Take off the protection cap. Before the first application, test the spraying mechanism a few times on your arm or in the air. Notice that there is a small step in the nozzle; to apply the spray, press the nozzle fully down. Hold the bottle approximately 15–20 cm (6–8 inches) from the eyes. Close both eyes and then apply 1–2 sprays on the eyelids. Put the cap on. You may use the spray 1–4 times a day or more frequently, if needed and while wearing contact lenses. If you are using other personal care products or make-up in the eye area, let them settle for at least 10 minutes before applying the spray 20 cm (8 inches) from the eyes. Or, use the other product not earlier than 10 minutes after applying the spray. Use the contents within six (6) months from opening and by the expiry date indicated in the stamp on the bottle. (≅ 6 months)

Precautions and warnings. No specific contraindications. Do not use if you are sensitive to any of the ingredients. • Do not use if the bottle is damaged. The bottle contains a sterile bag that shrinks due

to usage. • To avoid contamination, do not touch the eye or skin with the tip of the nozzle. • Do not touch the tip of the nozzle with fingers. • If the spray gets directly in the eye, it may cause temporary uncomfortable feelings. If needed, rinse the eyes with clean water. • Leave at least 10–15 minutes between applications of the spray and an ophthalmic medication. • Keep out of reach and sight of children. • Store at 5–30 °C, protect from freezing, direct sunshine and heat. Do not use the product in case it is frozen or has been stored in hot conditions for a long time. • Discard the empty bottle appropriately. Due to intentional overflow, a small volume of the solution will remain in the bottle.

Composition: Sea Buckthorn Oil 0,4 %, Sodium Hyaluronate 0,02 %, Purified Water, Polyoxethylene Sorbitan Monooleate, Glycerol, Sorbitan Monooleate, Citric Acid, Monohydrate, Trometamol, Potassium Chloride, Sodium Chloride

DANSK: Membrasin Vision Vitality Spray® lindrer symptomer på tørre øjne og fugter huden rundt om øjnene. Du må kun påføre sprayen på lukkede øjne. Mikro-emulsionen indeholder olie fra havtornbær, som langsomt spreder sig på tårerfilmen. Olien forstærker lipidlaget, og forhindrer dermed, at øjnene bliver tørre. Hyaluronat bidrager til tårevæskens evne til at binde vand og smører øjet. Den forhindrer også celleskader. Takket være det specielle design kan flasken anvendes i enhver position. Membrasin Vision Vitality Spray® er udviklet og fremstillet i Finland. Det er et registreret medicinsk-teknisk produkt uden alkohol, uden konserveringsmidler, og uden ingredienser af animalsk oprindelse. Velegnet til følsomme øjne og daglig brug.

Anvendelse: Tag beskyttelseshætten af. Inden første anvendelse, testes spray-

mekanismen nogle få gange på din arm eller ud i luften. Bemærk, at der er et lille "trin" i dysen. For korrekt anvendelse af sprayen, skal dysen trykkes helt ned. Hold flasken cirka 15–20 cm fra øjnene. Luk begge øjne og spray 1–2 gange på hvert øjenlåg. Sæt hætten på igen. Du kan bruge sprayen 1–4 gange om dagen og ved behov oftere, også ved samtidig brug af kontaktlinser. Hvis du bruger make-up eller sminke i øjenområdet, skal dette tørre i mindst 10 minutter, før du anvender sprayen og spraye ca 20cm fra øjnene. Alternativt kan make-up/sminke lægges tidligst 10 minutter efter, at du har sprayet. Membrasin Vision Vitality Spray skal anvendes inden for sex (6) måneder efter åbning, og inden den udløbsdato, som er stemplet på flasken. (≅ 6 måneder)

Forholdsregler og advarsler - Ingen specifikke kontraindikationer. Må ikke bruges, hvis du er overfølsom over for nogen af ingredienserne. • Må ikke bruges, hvis flasken er beskadiget. Flasken indeholder en steril pose, der krymper under brug. • For at undgå infektion må spidsen af dysen ikke berøre øjnene eller huden. • Rør ikke spidsen af dysen med dine fingre. • Hvis væsken kommer direkte ind i øjet, kan det give et midlertidigt ubehag. Skyl øjnene med rent vand, hvis det er nødvendigt. • Lad der gå mindst 10–15 minutter mellem anvendelse af sprayen og anvendelse af medicinske øjendråber eller øjensalve. • Opbevarer utilgængeligt for børn. • Opbevarer ved 5–30 °C og beskyttes mod frost, direkte sollys og varme. Brug ikke dette produkt, hvis det har været frosset, eller hvis det er blevet opbevaret i varme omgivelser i længere tid. • Smid den tomme flaske ud med almindeligt husholdningsaffald. Af tekniske årsager kan flasken ikke tømmes helt. Dette er medregnet, når flasken fyldes, så den angivne mængde kan garanteres.

Indhold: Olie fra havtornbær 0,4 %, natriumhyaluronat 0,02 %, rensed vand, polyoxetylen sorbitan monooleat (polysorbitat 80), glycerol, sorbitanmonooleat, citronsyre monohydrat, trometamol, kaliumklorid, natriumklorid

DEUTSCH: Membrasin Vision Vitality Spray® lindert die Symptome trockener Augen und befeuchtet die Haut um die Augen herum. Halten Sie die Augenlider stets geschlossen, wenn sie den Spray anwenden. Die Mikroemulsion enthält Öl aus Sanddornsaamen, das sich langsam auf dem Tränenfilm des Auges ausbreitet. Das Öl stärkt die Lipide des Tränenfilms, die die Augen gegen das Austrocknen schützen. Hyaluronat stärkt die Wasserbindungsfähigkeit und fördert die Befeuchtung der Augen; außerdem verhindert es die Beschädigung von Zellen. Dank dem speziellen Design kann die Flasche in jeder Position verwendet werden. Der in Finnland entwickelte und hergestellte Membrasin Vision Vitality Spray® ist ein registriertes Medizinprodukt, das frei von Alkohol, Konservierungsstoffen oder Produkten tierischen Ursprungs ist. Für empfindliche Augen und den täglichen Gebrauch geeignet.

Gebrauchsanweisung: Nehmen Sie die Schutzkappe ab. Vor der ersten Anwendung sollten Sie den Sprühmechanismus testen, indem Sie die Flüssigkeit einige Male auf Ihren Arm oder in die Luft sprühen. Beachten Sie, dass die Düse einen Druckpunkt aufweist. Um zu sprühen, die Düse vollständig herunterdrücken. Die Flasche etwa 15–20 cm von Ihren Augen entfernt vorhalten. Schließen Sie beide Augen und wenden Sie den Spray durch Verabreichung von 1–2 Sprühstößen auf die Augenlider an. Setzen Sie die Schutzkappe erneut

auf. Sie können das Spray 1–4 Mal am Tag oder bei Bedarf häufiger verwenden, während Sie Kontaktlinsen tragen. Wenn Sie andere Pflegemittel oder kosmetische Produkte für den Augenbereich benutzen, lassen Sie diese wenigstens 10 Minuten einwirken, bevor Sie den Spray 20 cm von den Augen entfernt aufrufen. Oder benutzen Sie das andere Produkt nicht früher als 10 Minuten nach dem Aufrufen des Sprays. Verbrauchen Sie den Inhalt des Sprays innerhalb von sechs (6) Monaten nach Erstbenutzung und vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums, das auf der Flasche aufgedruckt ist. (≅ 6 Monate)

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen: • Es sind keine besonderen Nebenwirkungen bekannt. Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

• Beschädigte Flaschen nicht verwenden. Die Flasche enthält einen sterilen Beutel, der mit zunehmendem Verbrauch schrumpft. • Um eine Kontamination zu vermeiden, sollten Sie die Haut oder Augen nicht mit der Düse berühren. • Die Spitze der Spraydüse nicht mit den Fingern berühren. • Wenn der Sprayinhalt direkt in die Augen gelangt, kann er vorübergehend Beschwerden hervorrufen. Falls nötig, die Augen mit sauberem Wasser ausspülen. • Warten Sie mindestens 10–15 Minuten zwischen der Anwendung des Sprays und dem Verabreichen anderer Augenmedikamente. • Von Kindern fernhalten. • Bei Temperaturen zwischen 5–30 °C lagern, gegen Kälte, direkte Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Benutzen Sie das Produkt nicht mehr, falls es eingefroren ist oder über längere Zeit in heißer Umgebung gelagert wurde. • Die leere Flasche ordnungsgemäß entsorgen. Aufgrund einer gewissen Überfüllung bleibt ein kleiner Rest der Lösung in der Flasche enthalten.

Inhaltsstoffe: Sanddornöl 0,4%, Natriumhyaluronat 0,02 %, destilliertes Wasser, Polyoxetylen sorbitanmonooleat,

Glycerin, Sorbitanmonooleat, Zitronensäure-Monohydrat, Trometamol, Kaliumchlorid, Natriumchlorid

FRANÇAIS: Le Membrasin Vision Vitality Spray® soulage la sécheresse oculaire et hydrate la peau autour des yeux. Appliquez toujours l'aérosol sur les paupières fermées. La microémulsion contient de l'huile de graines d'argousier qui se propage lentement sur le film lacrymal. L'huile renforce la couche lipidique lacrymale pour protéger les yeux de la sécheresse. Le hyaluronate soutient la capacité de fixation d'eau du liquide lacrymal et lubrifie les yeux; il empêche également les dommages cellulaires. La technologie du flacon permet de l'utiliser dans toutes les positions. Développez et fabriquez en Finlande, Membrasin Vision Vitality Spray® est un dispositif médical. Il est formulé sans alcool, sans conservateur et sans aucun ingrédient d'origine animale. Il est destiné aux yeux sensibles et peut une utilisation quotidienne.

Mode d'emploi: Retirez le capuchon de protection. Avant la première application, tester le mécanisme de pulvérisation à plusieurs reprises sur votre bras ou dans l'air. Il y a 2 niveaux de pression dans la buse; pour appliquer l'aérosol, appuyer sur la buse jusqu'au fond. Tenir la bouteille à environ 15 cm des yeux. Fermer les deux yeux puis appliquer 1 à 2 pulvérisations sur les paupières. Remettre le capuchon. Vous pouvez utiliser l'aérosol 1 à 4 fois par jour ou plus fréquemment si nécessaire. Les personnes utilisant de lentilles de contact peuvent utiliser ce produit. Si vous utilisez d'autres produits de soins personnels ou du maquillage pour le contour des yeux, laissez-les reposer pendant au moins 10 minutes avant d'appliquer le spray à une distance de 20 cm. Au choix, vous pouvez les utiliser au moins 10 minutes après l'application du spray. Utiliser le contenu dans les six (6) mois à compter de l'ouverture et avant la date

d'expiration indiquée sur l'étiquette du flacon. (☞ 6 mois)
Précautions et avertissements: Pas de contre-indication spécifique. Ne pas utiliser en cas de sensibilité à l'un des ingrédients. • Ne pas utiliser si le flacon est endommagé. Le flacon contient un sac stérile qui rétrécit en raison de l'utilisation. • Ne pas toucher l'oeil ou la peau avec l'embout du flacon pour éviter la contamination. • Ne pas toucher l'embout du flacon avec les doigts. • Si l'aérosol atteint directement les yeux, il peut provoquer des sensations inconfortables temporaires. Si nécessaire, rincer les yeux avec de l'eau propre. • Attendre au moins 10 à 15 minutes avant d'appliquer toute autre préparation ophtalmique. • Conserver hors de la portée et de la vue des enfants. • Conserver entre 5 et 30 ° C, protéger du gel, du soleil et de la chaleur. Ne pas utiliser le produit s'il a gelé ou a été stocké à des températures élevées pendant une longue période. • Jeter le flacon vide de manière appropriée. En raison du suremballage intentionnel, il est normal qu'un petit volume de la solution reste dans le flacon.
Composition: Huile d'argousier 0,4 %, hyaluronate de sodium 0,02 %, eau purifiée, monooléate de polyoxyéthylène-sorbitan, glycerine, monooléate de sorbitan, acide citrique monohydrate, trometamol, chlorure de potassium, chlorure de sodium.

NEDERLANDS: Membrasin Vision Vitality Spray® vermindert het gevoel van droge ogen en hydrateert de huid rond de ogen. De micro-emulsie bevat duindoelolie, dat zich langzaam over de traanlaag verspreidt. De olie versterkt de lipidenlaag van het traanvocht om zo de ogen tegen uitdrogen te beschermen. Hyaluronaat ondersteunt het vochtvasthoudend vermogen van het traanvocht en smeert de

ogen; het voorkomt tevens celbeschadiging. Membrasin Vision Vitality Spray® is een in Finland ontwikkeld, geproduceerd en geregistreerd medisch hulpmiddel zonder alcohol, zonder conserveringsmiddelen en zonder deeltjes ingrediënten. Geschikt voor gevoelige ogen en dagelijks gebruik.
Instructies voor gebruik: Verwijder de beschermdop. Test voor het eerste gebruik het spraymechanisme een paar keer op uw arm of in de lucht. De spraykop heeft een klein verloop; druk, om de spray aan te brengen, de spraykop volledig in. Houd het flesje op ongeveer 15-20 cm van de ogen. De spray alleen op gesloten oogleden aanbrengen. Sluit beide ogen en breng 1-2 sprays aan op de oogleden. Doe de dop op het flesje. U kunt de spray 1-4 keer per dag gebruiken of vaker, indien nodig en tijdens het dragen van contactlenzen. Dankzij het speciale ontwerp kan het flesje in iedere houding gebruikt worden. Wanneer u andere persoonlijke verzorgingsproducten of make-up gebruikt rond de ogen, laat dit dan tenminste 10 minuten intrekken voordat u de spray gebruikt 20 cm vanaf de ogen. Of, gebruik het andere product niet binnen 10 minuten na aanbrengen van de spray. De inhoud dient gebruikt te worden binnen zes (6) maanden na de opening van de voor aflopen van de dop op het flesje vermeldde houdbaarheidsdatum. (☞ 6 maanden)

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen: • Geen specifieke contra-indicaties. Niet gebruiken als u gevoelig bent voor één van de ingrediënten. • Niet gebruiken als het flesje beschadigd is. Het flesje bevat een steriel zakje die door gebruik krimpt. • Raak, om besmetting te voorkomen, de ogen of huid niet aan met het uiteinde van de spraykop. • Raak het uiteinde van de spraykop niet aan met de vingers. • Als de spray direct in de ogen

terechtkomt, kan dit leiden tot een tijdelijk onprettig gevoel. Spoel de ogen, indien nodig, met schoon water. • Laat tenminste 10-15 minuten tussen gebruik van de spray en een oogheelkundig medicijn. • Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. • Bewaar het product bij kamertemperatuur en bescherm het tegen vorst, direct zonlicht en hitte. Gebruik het product niet als het bevoren is geweest of als het lange tijd onder warme/hete omstandigheden opgeslagen is geweest. • Gooi het lege flesje op gepaste wijze weg. Door opzettelijk overvullen blijft er een kleine hoeveelheid oplossing achter in het flesje.
Samenstelling: Duindoelolie 0,4 %, natriumhyaluronaat 0,02 % in gemedineerd water, Polyoxyethyleensorbitaanmono-oleaat, glycerol, sorbitaanmonooleaat, Citroenzuurmonohydrate, trometamol, kaliumchloride, natriumchloride

NORSK: Membrasin Vision Vitality Spray® lindrer symptomer på tørre øyne og fukter huden rundt øynene. Sprayen skal kun sprøyas på lukkede øyelokk. Mikstro-emulsjonen inneholder tindvedolje som sakte sprer seg på tårhinne. Oljen styrker tårelipidlaget for å beskytte øynene fra uttørring. Hyaluronate øker vannbindingskapasiteten til tårerøskene og smører øynene. Det hindrer også celleskade. Takket være den spesielle designen på flasken kan den brukes i hvilken som helst stilling. Membrasin Vision Vitality Spray® er utviklet og produsert i Finland, og er registrert medisinsk enhetsprodukt uten alkohol, uten konserveringsmidler og med ingen ingredienser av animalsk opprinnelse. Passer for sensitiv øyne og daglig bruk.
Bruksanvisning: Ta av beskyttelseshetten. Test sprøyte-mekanismen et par ganger på armen eller i luften for første påføring. Legg merke til at det er et lite trinn i munnstykket: trykk munnstykket helt ned for å påføre sprayen. Hold

flasken ca. 15-20 cm fra øynene. Lukk begge øynene og spray 1-2 ganger på øyelokkene. Sett hetten på. Du kan bruke sprayen 1-4 ganger om dagen og vid behov oftere, også med kontaktlinser på. Hvis du bruker andre produkter for personlig pleie eller sminke rundt øynene, la dem sette seg i minst 10 minutter før du bruker sprayen og spraye ca. 20 cm fra øynene. Bruk det andre produktet tidligst 10 minutter etter påføring av spray. Bruk innholdet innen seks (6) måneder fra åpning og før utløpsdatoen som er angitt i stempelet på flasken. (☞ 6 måneder)

Forholdigheter og advarsler
• Ingen spesielle kontraindikasjoner. Må ikke benyttes hvis du er sensitiv for noen av ingrediensene. • Må ikke brukes hvis flasken er skadet. Flasken inneholder en steril pose som krymper som et resultat av bruk.

• For å unngå forurensning, må du ikke berøre øyet eller huden med tuppen av munnstykket. • Ikke berør tuppen av munnstykket med fingrene. • Hvis sprayen sprøytes rett på øynene, kan det føre til midlertidig ubehag, hvis nødvendig, skyl øynene med rent vann. • La det gå minst 10-15 minutter mellom anvendelse av spray og en oftalmisk medisinerings. • Oppbevares utlengselig for barn. • Oppbevares ved 5-30 ° C, beskyttet mot frost, direkte sollys og varme. Ikke bruk produktet hvis det har vært frosset eller lagret under varme forhold i lengre tid. • Kast den tomme flasken på riktig måte. På grunn av tilsiktet overfylling, vil et lite volum av oppløsningen forblive i flasken.
Sammenheng: Tindvedolje 0,4 %, natriumhyaluronat 0,02 %, renset vann, polyoksyetylen-sorbitanmono-oleat, glycerol, sorbitanmono-oleat, sitronsyrmonohydrat, trometamol, kaliumklorid, natriumklorid

SUOMI: Membrasin Vision Vitality Spray® on suljetulle silmäluomelle annosteltava

emulsiosuihke, joka vähentää kuivaisuomaisuuden oireita ja kosteuttaa silmänympärysihoa. Mikroemulsion tiynöily levityttyä kyynelneesten pinnalle vahvistaa silmien kuivuiselta suojaavaa lipidikalvoa. Hyaluronatti tukee kyynelneesten vedenstomiskyykyä ja suojaa soluvaurioilta. Erikoisvalmisteista suihkepuoltoa voi käyttää missä asennossa tahansa. Membrasin Vision Vitality Spray® on Suomessa kehitetty ja valmistettu lääkinällinen tuote, joka ei sisällä alkoholia, säilöntäaineita eikä eläinperäisiä aineita. Soveltuu herkille silmille ja päivittäiseen käyttöön.

Käyttöohjeet: Irrota suojakorkki. Testaa annostelijan toimintaa ennen suihkeen ensimmäistä annostelua suihkauttamalla muutama kerta ensin käsivarseen tai ilmaan. Suuttimessa on pykäliä: paina suutin pohjaan asti suihkeen annostelmiseksi. Sulje molemmat silmät ja annostele suihke suljetuille silmäluomille noin 15-20 cm:n etäisyydeltä 1-2 suihkausta/kerta. Laita suojakorkki takaisin pullon suulle. Voit käyttää suihketta oireiden mukaan 1-4 kertaa päivässä, tai tarvittaessa useammin. Voit käyttää suihketta myös piilolinssien käytön aikana. Jos käytät muita silmälääkkeitä, anna niiden kuivua vähintään 10 minuuttia ennen kuin lisäät suihkeen ja suihkauta noin 20 cm päästä, tai lisää meikkiä tai silmälääkkeitä vasta 10 minuutin kuluttua suihkeen käyttämisestä. Käytä pullon kuuden (6) kuukauden kuluessa avaamisesta ja viimeisen käyttöpäivään mennessä. (☞ 6kk)
Varoituksia: • Eriytisyksi kontraindikatioita. Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin aineosalle. • Älä käytä tuotetta, jos pullo on vioittunut. Pullon sisällä on steriili sisäpussi, joka kutistuu käytössä. • Älä kosketa avatun pullon kärgäliä silmää tai ihoa kontaminaatioiden välttämiseksi. • Älä koskettele sormilla pullon kärkeä. • Suoraan silmään joutessaan suihke saattaa aiheuttaa väliaikaista epämukavuuden tunnetta. Voit tarvittaessa huuhdella silmän

puhtaalla vedellä. • Pidä vähintään 10-15 minuutin väli mahdollisen silmälääkkeen laittamisen kanssa. • Ei lasten lottuville eikä näkyville. • Säilytä 5-30 ° C lämpötilassa. Suojaa pullon jäätymiseltä, aurinngonvalolta ja lämmöltä. Älä käytä tuotetta, joka on jäähtynyt tai ollut pitkäaikaan kuumassa. • Hävitä tyhjä pullo asianmukaisesti. Yliätöyntyä vuoksi pulloon jää pieni määrä nestettä.
Koostumus: Sea: Buckthorn Oil (Tyrniöljy) 0,4 %, Sodium Hyaluronate 0,02 %, Purified Water, Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate, Glycerol, Sorbitan Monooleate, Citric Acid Monohydrate, Trometamol, Potassium Chloride, Sodium Chloride (☞ 6 månader)

SVENSKA: Membrasin Vision Vitality Spray® lindrar symtom av torröghet och återfuktat huden runt ögonen. Applicera alltid sprayen på slutna ögonlock. Mikroemulsionen innehåller havtornsolja som sakta sprider sig på tårfilmen. Oljan stärker tårelipidskiktet och skyddar ögonen mot torka. Hyaluronat stöder tåreröskans vattenbindningsförmåga och smörjer ögonen; det förhindrar också celleskador och återfuktat den omgivande huden. Tack vare sin speciella konstruktion kan flaskan användas i vilken ställning som helst. Membrasin Vision Vitality Spray® är utvecklade och tillverkad i Finland och är en registrerad medicinteknisk produkt som inte innehåller alkohol, konserveringsmedel eller ingredienser av animalsk ursprung. Lämplig för känsliga ögon och dagligt bruk.

Instruktioner för användning: Avlägsna skyddslocket. Testa spraymekanismen ett par gånger på armen eller i luften innan den första appliceringen. Observera att det finns ett litet steg i munstycket: tryck munstycket ända ner för att spraya. Håll flaskan ca 15-20 cm från ögonen. Stäng båda

ögonen och applicera sedan 1-2 sprayomgångar på ögonlocken. Placera tillbaka locket på flaskan. Du kan använda sprayen 1-4 gånger om dagen och vid behov oftare, även om du använder kontaktlinser. Om du använder andra hudvårdsprodukter eller make-up kring ögonen, vänta minst 10 minuter innan du använder sprayen och spraya ca 20 cm från ögonen. Använd andra produkter tidigast 10 minuter efter applicering av sprayen. Förbrukas inom sex (6) månader efter öppnandet och före utgångsdatumet som anges på stämpeln på flaskan. (☞ 6 månader)

Varningar: • Inga specifika kontraindikationer. Använd inte om du är allergisk mot något av innehållsämnen. • Använd ej skadad flaska. Flaskan innehåller en steril pÅse som krymper vid användning. • Vidrör inte ögat eller huden med munstyckets spets. • Vidrör inte munstyckets spets med fingrarna. • Om sprayen kommer direkt i ögat, kan det orsaka tillfällig obehag. Skölj ögat med rent vatten vid behov. • Låt minst 10-15 minuter passera mellan användning av sprayen och andra ögonpreparat. • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. • Förvaras i 5-30 ° C skyddad mot frysnings, direkt solljus och värme. Använd inte produkten i fall det har frusit eller om den har förvarats i varma förhållanden under en lång tid. • Kasta flaskan vederbörligt efter användning. På grund av avskiktig överflynad, kommer en liten volym av lösningen att finnas kvar i flaskan.
Sammansättning: Havtornsolja 0,4 %, natriumhyaluronat 0,02 %, renat vatten, polyoxyetylen-sorbitanmono-oleat, glycerol, sorbitanmono-oleat, citronsyrmonohydrat, trometamol, kaliumklorid, natriumklorid